


[奨 励 賞] 自動尿検査システム「UC2000」

株式会社 ヨコタコーポレーション

〒779-3306 徳島県麻植郡川島町大字字字辻4-2

TEL.0883(25)2121

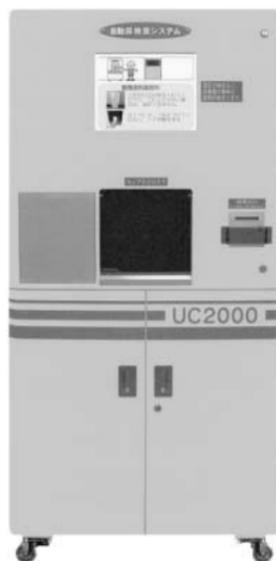

採尿されたカップを装置の所定の位置に置くだけでブドウ糖、蛋白質、潜血、ウロビリノーゲン、pH、アスコルビン酸の6項目の特性を自動的に検査する装置。

測定は10ccと少量の尿でも行え、測定結果は採尿カップを置いてから約90秒と短時間でプリントアウトされる。バーコードを使用すれば測定した過去のデータも併せてプリントアウトでき、健康管理にも利用できる。

複数試薬を含む試験紙を自動機構で尿に付け、変色した紙面をCCDカメラで読み取って信号処理し、プリントアウトするため素人が1人でも検査できる。測定後の尿と採尿カップは装置内で分別処理される。